


voar

보아르 클린이스마트

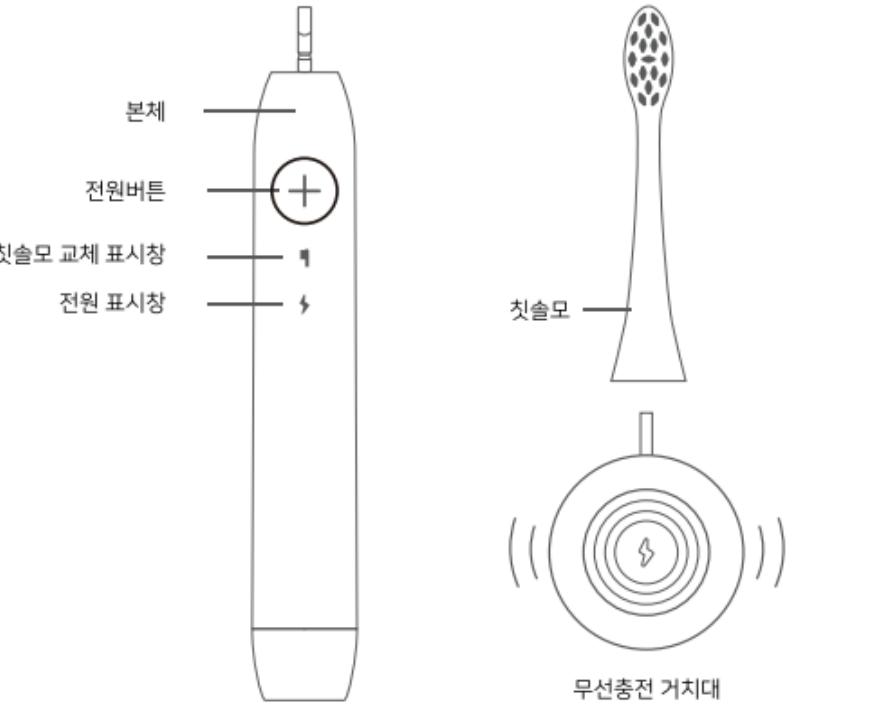

진동 강도

센시티브 모드(2분 동작), 스트롱 모드(3분 동작)를 선택하여 사용할 수 있습니다.

시간알림

치아를 4개의 섹션으로 나누어 2분 내에 양치할 수 있도록 30초당 1초씩 진동
파형이 달라집니다.

※ 스트롱 모드도 동일합니다.

칫솔모 교체 타이밍

칫솔모 교체 표시창에 불이 들어오면 칫솔모를 바꾸어 주세요.

※ 사용 형태에 따라 수명은 달라질 수 있습니다. 설명서를 숙지해 주세요.

작동방법

전원 켜기: 짧게 한번 눌러줍니다.

전원 끄기: 전원을 켠 뒤 3초 후 한 번 더 짧게 누르면 전원이 꺼집니다.

강도 변경: 전원을 켠 뒤 3초 이내 한번 더 짧게 누르면 동작 강도를 변경할 수 있습니다.

센시티브 (2분) - 스트롱 (3분) - 전원 OFF

칫솔모 리셋: 전원 버튼을 3초간 누르면 칫솔모 교체 표시창이 점멸합니다.

※ 칫솔모 리셋 시 충전기와 분리해 주세요.

설정 리셋: 충전을 하며 전원 버튼을 3초간 누르면 모든 설정이 초기화됩니다.

배터리 상태표시


- 40% power : 전원 표시창에 불이 들어옵니다.

- 20% power : 전원 표시창에 불이 들어오며 알림 진동을 합니다.

- 충전시 : 전원 표시창이 서서히 밝아졌다 어두워졌다 반복됩니다.

- 완충시 : 점등되어 있습니다.

보아르 클린이소닉

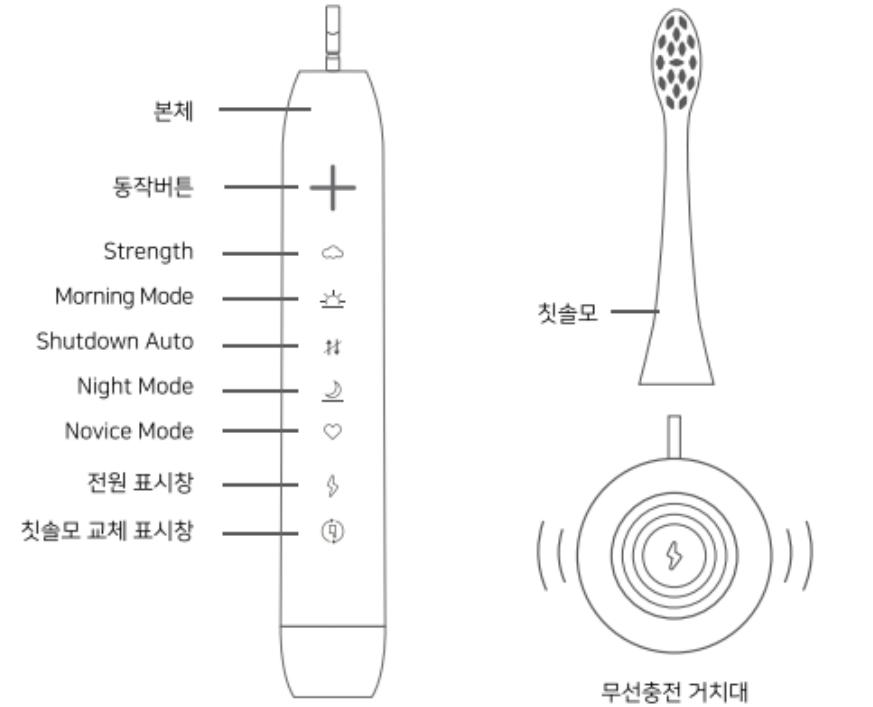

Strength

진동의 강도를 조절할 수 있습니다.

- 커지지 않음 : 치아나 잇몸이 민감한 경우
- 보통 밝음 : 권장하는 강도의 진동
- 가장 밝음 : 이물감이 많거나 강한 칫솔질이 필요한 경우

Morning Mode

2분간 일반세정 모드로 작동 후 1분간은 치태제거 모드로 작동됩니다.

Shutdown Auto

아침 저녁 모드 자동전환 표시등입니다.
점등이 꺼져 있어야 아침, 저녁 모드로 자동 변환됩니다.

Night Mode

2분간 미백모드로 작동 후 1분간은 GUM MODE로 작동됩니다.

Novice Mode

전동칫솔을 처음 사용하는 사람은 이 동작 모드를 사용해 주세요.
5일동안 GUM MODE로 점차 5단계로 진동 강도가 강해집니다.
※ 일 2회, 2분 이상 사용 시 1일로 적용되며, 진동 강도는 조절 불가합니다.

칫솔모 교체 표시창

칫솔모 교체 표시창에 불이 들어오면 칫솔모를 바꾸어 주세요.
※ 교체 표시창이 들어왔을 때, 전원을 끄면 진동이 오며, 전원 버튼을 길게 누르면
표시창 및 진동이 사라집니다.

3" Three seconds slow vibration

치약이 떨어지는 것을 방지하기 위해 작동 후 3초간은 약하게 진동합니다.

작동방법

전원 켜기 : 1회 누르면 작동합니다.

전원끄기 : 전원을 켠 뒤 3~10초 이내에 한 번 더 짧게 누르면 전원이 꺼집니다.

MODE 선택 : 전원을 켠 후 3초 이내 전원 버튼을 눌러 사용 MODE를 선택할 수 있습니다.

강도 조절 : 작동시 3초간 전원 버튼을 누르면 강도조절이 됩니다.

일시정지 : 전원을 켠 뒤, 10초 이후에 짧게 한 번 누르면 일시정지가 됩니다.

일시정지 상태에서 15초 이내에 짧게 한 번 누르면 모드가 계속 진행되고, 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

칫솔모 리셋 : 칫솔모 교체 점등시 전원 버튼을 5초간 누르면 칫솔모 타이머가 리셋됩니다.

아침 저녁 모드 변환 : 전원 OFF 상태에서 전원 버튼을 3초간 누르면 자동 변환이 ON/OFF 됩니다. 자동변환 ON시 1회 깜빡이며 자동변환 OFF시 2회 깜빡입니다. 자동변환 OFF 설정 후 사용시 해당 LED가 지속점등 됩니다.


설정 리셋 : 충전을 하며 전원 버튼을 3초간 누르면 모든 설정이 초기화 됩니다.

주의사항

사용 전 아래 사항을 숙지하신 후 사용하시기 바랍니다.

- 충전기를 물기가 있는 곳에 두지 마십시오. 옥조, 세면대, 싱크대 등, 물이 가까이 있는 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오. 또한 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 세척한 경우 충전기를 완전히 건조한 다음에 다시 전원에 연결하십시오.
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 칫솔모, 손잡이 또는 충전기를 식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 최근 2개월 이내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 경우에는 칫솔을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 보아르 클린이 칫솔은 국내 안전 기준에 따라 전자파 인증을 받은 제품입니다. 심장 박동 보조기 등 보조 기구를 이식받은 경우에는 주치의나 해당 이식 기기의 제조업체에 문의하여 충분히 이해한 후 사용하십시오.
- 의료적 문제가 있을 경우 클린이스마트, 소닉 전동칫솔을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 본 제품으로는 치아와 잇몸 그리고 혀만 세정할 수 있으므로 다른 용도로는 사용하지 마십시오. 사용 중 불편함이나 통증이 느껴지면 제품 사용을 중단하고 치과 전문의와 상의하십시오.
- 칫솔모의 솔이 눕거나 휘면 사용을 중단하십시오. 2개월마다 또는 마모의 흔적이 보이면 그 전이라도 칫솔모를 교체하십시오. 보아르 클린이 전용 칫솔모 이외의 다른 칫솔모를 사용하지 마십시오.
- 사용하는 치약 성분에 과산화수소, 탄산수소나트륨, 중탄산염(미백 치약 주성분)이 포함된 경우, 칫솔질을 하고 난 후 칫솔모를 비누로 닦고 물로 깨끗이 씻어 내십시오. 이렇게 해야 플라스틱 부분의 손상을 방지할 수 있습니다.
- 제품 규격에 맞는 어댑터 사용을 권장드립니다.
(해당 제품의 정격 입력은 '5V, 1A'입니다. 급속 충전 시, 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

보아르 클린이 전동칫솔 사용가이드

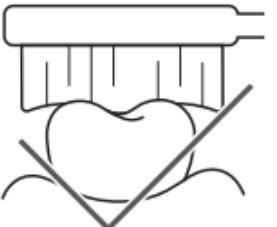


Correct



Error

- 칫솔모를 치아에 강하게 누르지 마세요.
- 칫솔모 중앙이 치아에 닿아야 합니다.
- 올바른 사용을 위해 설명서를 숙지해 주세요.


사용방법

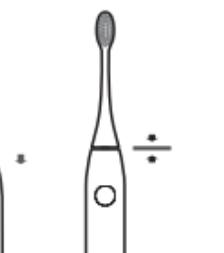

- 칫솔모를 핸들의 전원 방향이 일치하도록 꽂아주십시오.
- 칫솔모를 금속 샤프트에 꼭 눌러 고정시킵니다.
- 0.5~1mm의 갭이 발생할 수 있으며 이는 정상 범주입니다.



- 칫솔모를 물에 적신 후 적정량의 치약을 바르십시오.

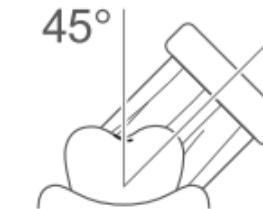

45°


- 칫솔모를 그림과 같이 잇몸에 45° 정도로 살짝 비스듬하게 올려 놓고 잇몸 경계 부분이나 그 약간 아래에 칫솔모가 닿도록 누릅니다.

※ 항상 칫솔모 중앙이 치아에 닿아야 합니다.

- 전원 버튼을 눌러 보아르 클린이 칫솔의 전원을 켭니다.
- 치아와 잇몸에 칫솔모를 가볍게 올려 놓습니다. 칫솔모가 치간을 닦을 수 있도록 앞뒤로 작게 움직이면서 치아를 닦습니다.

※ 칫솔모가 살짝 퍼지도록 해야 합니다. 문지르지 마십시오.

보아르 클린이 전동칫솔 사용가이드

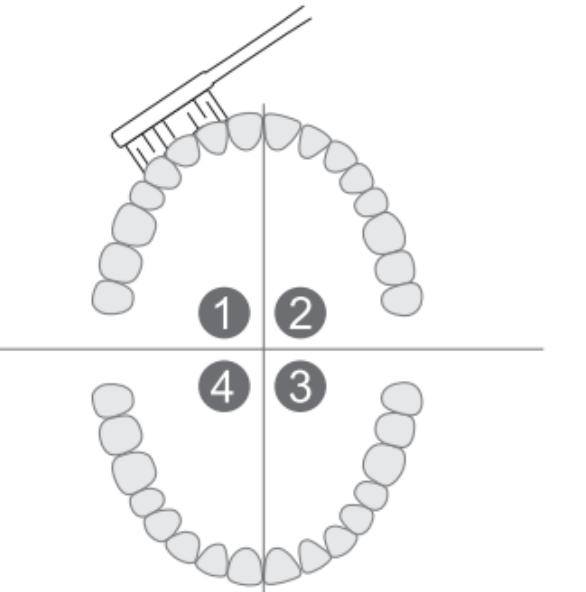

- 순서대로 각 구간을 30초씩 양치하면 총 칫솔질 시간은 2분이 걸립니다.
- ①구간(윗니 바깥쪽)부터 칫솔질 한 후 ②구간(윗니 안쪽)을 닦고 계속해서 ③구간(아랫니 바깥쪽)을 닦은 후에 마지막으로 ④구간(아랫니 안쪽)을 칫솔질 합니다.

※ 칫솔질 시간이 완료된 다음 추가로 어금니 및 칙색 부분을 닦을 수 있습니다.
또한 칫솔의 전원을 켜거나 끈 상태에서 원하는 대로 혀를 닦을 수도 있습니다.

- 클린이스마트, 소닉 전동칫솔은 다음과 같은 경우에 사용해도 안전합니다.
 - 치아 교정기(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 보다 빨리 마모될 수 있습니다.)
 - 치아 보철물(신경치료, 크라운, 래미네이트, 임플란트)

※ 교정기 혹은 보철물의 상태가 온전하지 않은 경우엔 치과 전문의와 상의하십시오.

제품정보

제품명: 보아르 클린이 전동칫솔

모델: 클린이스마트, 클린이소닉

정격전압: 5V 1A

소비전력: 2.6W

방수등급: IPX7

수입원 / 인증자상호: 오아주식회사

서울시 서초구 서리풀길 3 HS빌딩 2층

A/S 및 제품문의: 1544-9995

보아르 클린이스마트, 클린이소닉 전용칫솔모는
당사 홈페이지(<http://store.oa-world.com>)에서도 구입 가능합니다.



오아 주식회사

서울시 서초구 서리풀길 3 HS빌딩 2층
A/S 및 제품문의 : 1544-9995
www.oa-world.com