




클린이 큐브

오아 | OOR-003WH

사용설명서

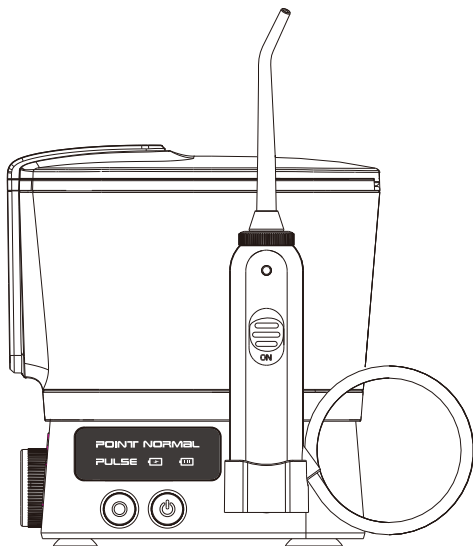


오아 클린이큐브를 구입해 주셔서 감사합니다.
본 사용설명서를 충분히 숙지 후 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.




목 차

1. 제품 구성	01
2. 제품 명칭	02
3. 조립 방법	03
4. 동작 방법	04~05
5. 사용 방법	06
6. 충전 방법	07
7. 세척 및 보관 방법	08
8. 주의 사항	09
9. FAQ	10
10. 제품사양	11

제품 구성

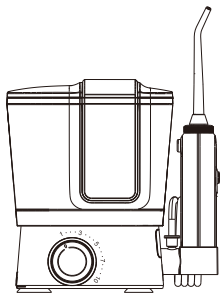


본품

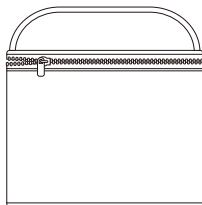

파우치



제트팁
1개

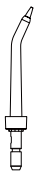

픽포켓팁
1개



플라그팁
1개



치열교정팁
1개



허클리너팁
1개



USB
충전케이블 1개





충전포트
보호캡 1개




사용설명서


제품 명칭

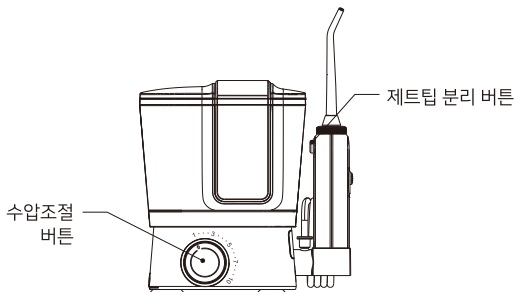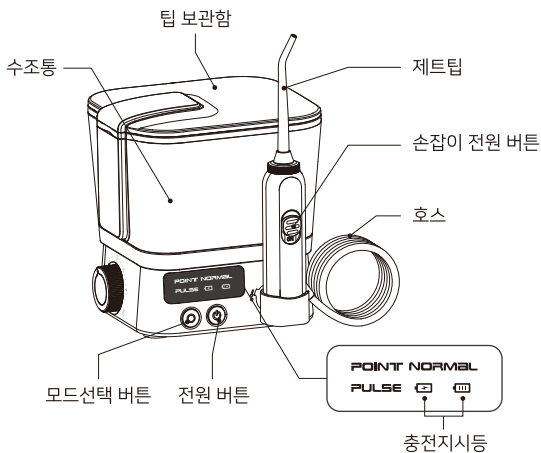


조립 방법

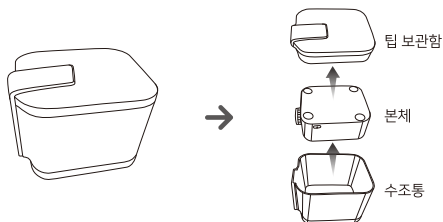

1. 제품을 꺼낸 후, 팁 보관함을 꺼내고 본체를 꺼내 주십시오.

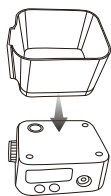

2-1. 수조통을 그림과 같이 본체에 올려주십시오.

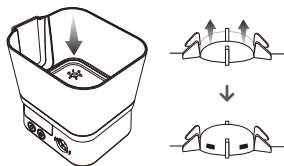


2-2. 본체와 수조통의 물주입구 부분에 맞춰서 올려주시고 하얀색 마개가 살짝 위로 올라오도록 눌러주십시오.




3. 팁 보관함을 그림과 같이 열면 손잡이와 팁이 보관되어 있습니다.

동작 방법

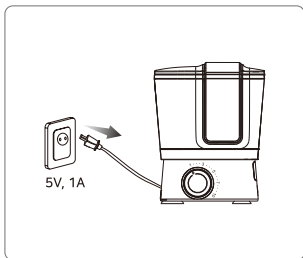


1. 처음 사용하기 전에 완전히 충전해주시고.

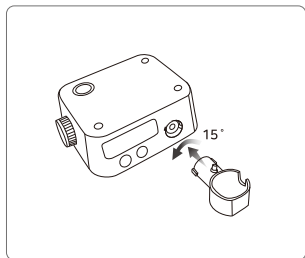


2. 손잡이 받침대 장착

손잡이 받침대를 본체 삽입구멍에 넣고 누르면서 왼쪽으로 15° 돌려 장착합니다.

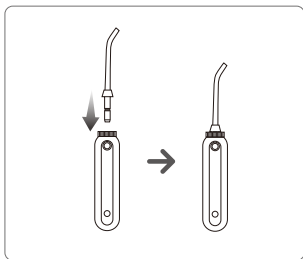

3. 제트팁 장착

제트팁을 손잡이 위쪽 중앙에 놓고 딸깍 소리가 날 때까지 눌러서 장착합니다. 제거할 때는 제트팁분리 버튼을 눌러 제거해 주십시오. (제트팁이 삽입 되었을 때, 360° 회전이 가능합니다.)

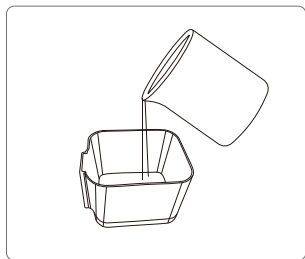

4. 수조통 채우기

수조통에 물을 채워주시고.


※ 물을 채우는 도중이나 분해 시에 동작 시키지 마십시오.

5. **모드설정** : 모드(⊙) 버튼을 'Normal', 'Point', 'Pulse' 모드로 변경이 가능합니다.

- Normal : 일반 세정모드이며, 이 사이에 있는 음식을 효과적으로 제거해 줍니다.
- Point : 물줄기가 비연속적으로 나오며, 치아 사이를 집중적으로 관리해주는 모드입니다.
- Pulse : 잇몸 마사지 모드로, 펄스수압으로 잇몸을 마사지 해줍니다.


※ 자동 전원 차단 : 모든 모드는 2분 후에 자동 OFF 됩니다.

※ 본체에 전원을 켜 후, 손잡이 전원을 약 7-8초 동안 켜지 않을 경우 본체 전원이 꺼집니다.

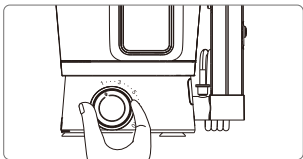


6. 수압 조절

수압 조절 버튼을 돌려 적당한 수압을 조절합니다.

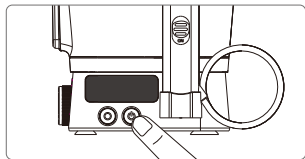


7. 본체 전원 ON

전원 버튼(⊙)을 1초 정도 누르면 동작이 됩니다.

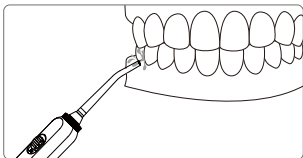


8. 분사 위치 설정

치아 쪽으로 분사 위치를 조준해줍니다.

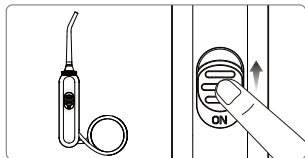


9. 손잡이 전원 ON

손잡이 전원을 ON으로 올리면 동작이 됩니다.

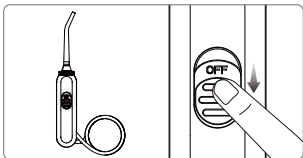

10. 손잡이 전원 OFF


손잡이 전원을 OFF로 내리면 동작이 멈춥니다.

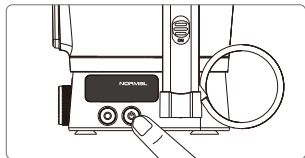

11. 본체 전원 OFF

동작 중에 전원 버튼(⊙)을 눌렀다 떼면 전원이 꺼집니다.

사용 방법

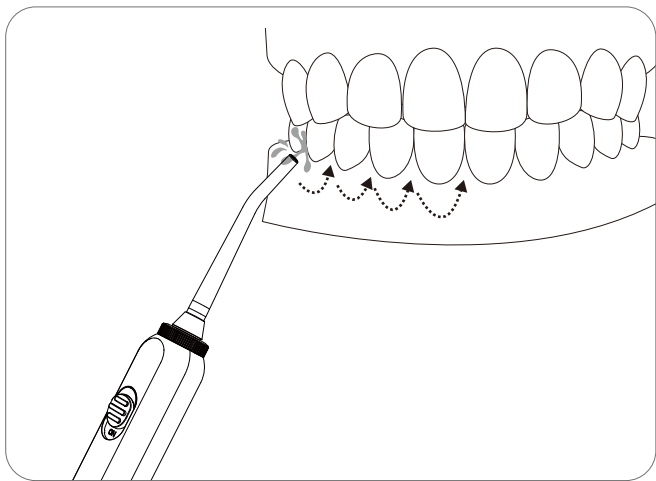



1. 제트팁을 치아 쪽으로 조준하고 제품을 켜주십시오.
2. 제품을 살짝 기울여서 물줄기가 치아와 잇몸 사이, 치아와 치아 사이를 향하게 하고 사용해 주십시오.
3. 어금니에서 앞니 쪽으로 사용을 권장 드리며, 치아의 앞뒤와 어금니 뒤쪽에도 사용해 주십시오.

※ 처음 사용하시는 분이나 잇몸이 약하신 분은 낮은 수압부터 사용하시는 것을 권장드립니다.

※ 차가운 물을 사용할 경우 이가 시릴 수 있으니, 미온수 사용을 권장드립니다.

충전 방법

충전 시 주의사항


- 제품을 충전 할 때에는 건조한 상태에서 해주십시오.
- 처음 사용하시거나 장시간 미사용을 한 경우 약 8시간 정도 충전하는 것을 권장드립니다.
- 제품 충전시에 '5V, 1A' 아답터를 이용해 주십시오. 급속 충전기를 사용할 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리 잔량이 15 % 이하일 때, 빨간색 등이 점등됩니다.
- 충전 중일 경우 빨간색 충전창()이 점멸되며, 충전완료 시에는 초록색 충전창()으로 표시됩니다.

배터리 잔량 확인 방법

전원이 꺼진 상태에서 모드버튼()을 길게 눌러 LED창으로 확인이 가능합니다.


		
1가지 LED 모드 켜짐	2가지 LED 모드 켜짐	3가지 LED 모드 켜짐
30% 미만	31~61%이상	61% 이상

세척 및 보관 방법

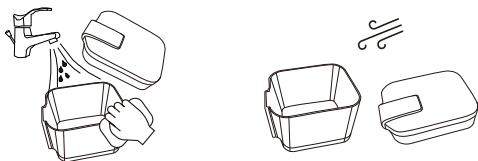

수조통

- 깨끗한 물로 세척해 주십시오.
- 세척 후에는 꼭 건조 시켜주십시오.
- 물기가 있는 상태에서 낮은 온도에 노출시키지 마십시오.
- 오랫동안 사용하지 않을 시, 건조시켜 보관해 주십시오.

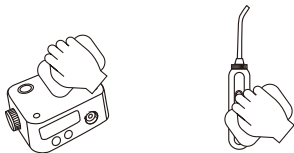

본체, 손잡이 및 제트팁

- 사용 후에는 건조시켜 주시고, 부드러운 천으로 물기 및 오염물질을 닦아내 주십시오.
- 오염이 심할 경우 물로 세척은 가능하나 젖은 천 등을 이용하여 닦아내는 것을 권장드립니다.
- 3개월 마다 제트팁을 교체하는 것을 권장드립니다.

※ 알코올, 벤젠, 시너 등의 화학제품으로 제품을 세척하지 마십시오.

※ 50℃ 이상의 온도에서 세척하지 마십시오.

주의 사항

1. 제품을 수리 또는 분해 하지 마십시오.
2. USB 충전케이블에 이상(발열, 파손 등)이 있으면 사용하지 마십시오.
3. 제품이 충격(떨어뜨림, 부딪침 등)을 받은 뒤, 동작이 되지 않은 경우 사용하지 마십시오.
4. 젖은 손으로 충전포트에 손을 대지 마십시오.
5. 기본적인 방수는 가능하나, 오랜 시간 침수가 되지 않도록 주의해 주십시오.
6. 수조통에는 물 또는 액체로 된 구강청결제만 넣어 사용해 주십시오.
7. 호스를 접거나 구부리지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
8. 최근 2개월 안에 치아나 잇몸 수술을 하신 분은 전문가의 상담 후에 사용해 주십시오.
9. 어린이와 잇몸이 민감하신 분, 잇몸에 문제가 있으신 분은 전문가와 상담 후에 사용해 주십시오.
10. 어린이가 가지고 놀지 못하도록 해주십시오.
11. 제품을 처음 사용할 경우 잇몸에 경미한 출혈이 발생할 수 있습니다.
1~2주 동안 사용한 후에도 출혈이 계속된다면 전문가의 상담을 받으십시오.
12. 혀 밑이나, 귀, 코와 같은 다른 신체에 사용하지 마십시오.
13. 혀나 구강에 상처가 있는 경우 사용하지 마십시오.
14. 제품을 욕조나 싱크대 등 빨려 들어 갈수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.
15. 5분 이상 연속해서 작동시키지 마십시오. 과열로 인해 고장의 원인이 될 수 있습니다.
16. 본체의 전원을 켜 후에 손잡이 전원을 켜지 않으면 제품에 무리를 줄 수 있습니다.
본체의 전원을 켜 후에 바로 손잡이 전원도 켜 주시기 바랍니다.

제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인하여 주세요.

증상	원인	해결방법
제품이 작동하지 않아요.	제품을 방금 구입했을 경우	제품을 충전 후 사용하십시오.
	장시간 사용하지 않았을 경우	
충전 후 작동 시간이 짧아요.	배터리 수명이 다했을 경우	고객센터로 문의해 주세요.
	충전시간이 부족했을 경우	6~8시간동안 충전 후 사용해 주세요.
수압이 너무 약해요.	제트팁의 형태가 변형된 경우	제트팁 내부에 이물질이 쌓이거나, 형태가 변형된 경우 수압이 약해질 수 있습니다. 제트팁을 교체해 주세요.
	물이 부족한 경우	물통에 물을 충분히 넣어주세요.
	수압 설정이 잘못된 경우	수압조절버튼으로 수압을 조절해 주십시오.
제트팁과 본체 사이에서 물이 새요.	제트팁이 알맞게 들어가지 않은 경우	제트팁을 제거한 후에 다시 끼워주세요.
물줄기가 나오지 않아요.	손잡이 전원을 켜지 않았을 경우	본체의 전원을 켜 후에 손잡이 전원도 켜주어야 합니다. 손잡이 버튼이 위로 올라가 있는지 확인해 주세요.

제품 사양

기자재명 : 구강세정기

상품명 : 오아 클린이큐브

모델명 : OOR-003WH

정격입력 : 5V, 1A

정격출력 : 3.7 V, 2000 mAh

소재 : ABS

수조통 용량 : 600 ml

수압 : 30 ~ 120 psi

맥동수 : 1400 ~ 1800 회/분

방수등급 : IPX7



오아 주식회사

서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의 : 1661-4555
www.oa-world.com