




바디스팟 Knee

오아 | OMS-013BK

사용설명서

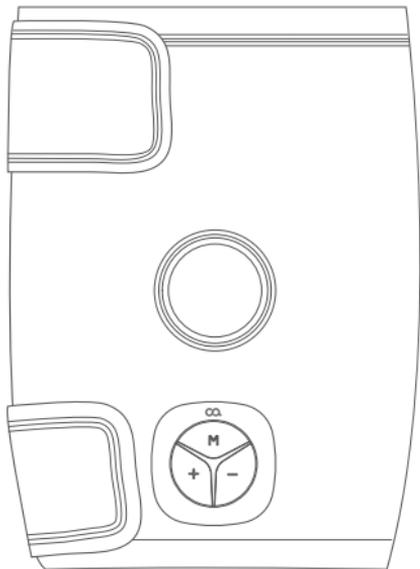

오아 제품을 구매해 주셔서 감사드립니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

바디스팟 Knee

오아 | OMS-013BK


목차

제품 소개 및 특징	01
제품 구성	02
제품 명칭	03
사용 방법	04 - 05
모드 설정 방법	06 - 08
충전 방법	09
제품 보관 및 관리 방법	10 - 11
폐기 지침	11
주의 사항	12 - 14
제품 사양	15
회사 정보	16

제품 소개 및 특징

- 본 제품은 무선으로 사용이 가능한 **무릎 EMS 저주파 마사지기**입니다.
- 본 제품은 **6가지의 다양한 모드로** 마사지가 가능합니다.
- 본 제품은 **15단계의 강도 조절** 기능이 있습니다.
※ 해당 강도는 사용 환경 및 배터리 상태에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
- 본 제품은 **C-타입 충전 케이블**을 통해 충전하여 편리합니다.
- 본 제품은 겔 패드가 부착 위치와 떨어질 경우 **1분 내로** 종료됩니다.
- 본 제품 사용 시 **약 30분** 사용 후 자동 전원 차단 회로가 설계되어 있습니다.


제품 구성

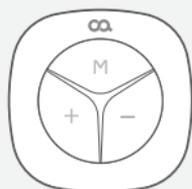


메인 기기



파우치

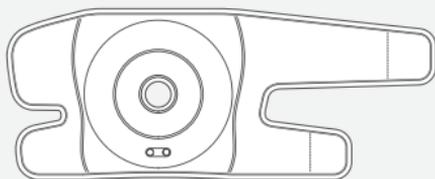

무릎패드

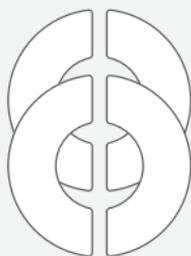

겔패드 (2EA)



USB 충전 케이블(Type-C)




사용설명서


제품 명칭

메인 기기

전면

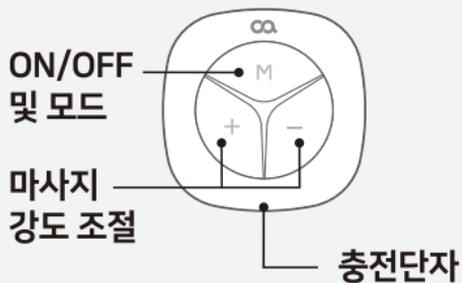


후면

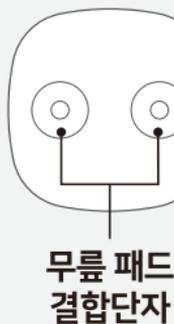


무릎패드

메인 기기
결합단자

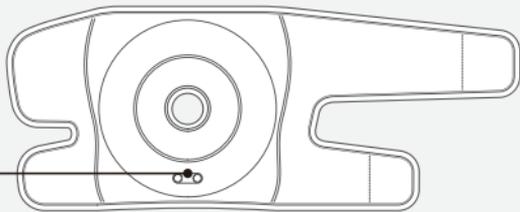


벨크로

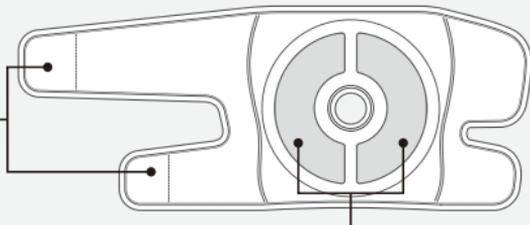

사용 방법

※ 하루에 한 번 사용을 권장합니다.


STEP
01

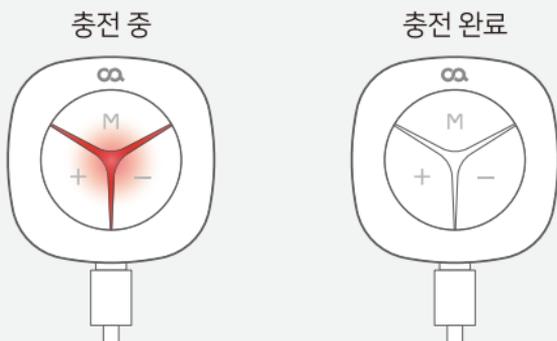

메인 기기가 완전히 충전이 되었는지 확인하십시오.

※ 충전 중 : 빨간색 LED / 충전 완료 : LED 꺼짐

STEP
02

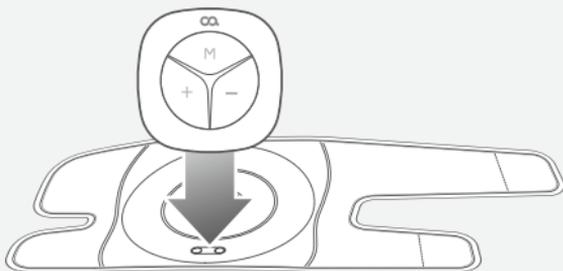

메인 기기를 무릎 패드 결합 단자에 부착하십시오.

사용 방법

STEP
03



무릎 패드를 원하는 부위에 맞춰 맨살에 착용하십시오.

※ 접촉 부위 밀착도에 따라 마사지 강도 차이가 있을 수 있으며,
겔 패드의 부착 위치에 따라 마사지 효과가 상이합니다.

※ 겔 패드가 부착 위치와 떨어질 경우 메인 기기가 자동으로 종료됩니다.

STEP
04




자신의 피부에 맞게 강도를 점차 높여 사용하십시오. 처음부터
높은 강도로 사용할 시 피부 및 근육에 무리가 있을 수 있습니다.

※ 본 제품 작동 시 강도에 따라 미세전류 소음이 발생합니다. 이는
메인 기기에서 무릎 패드를 통해 겔 패드로 전달하는 주파(저주파)
신호이며 정상적인 현상입니다.

모드 설정 방법


STEP
01

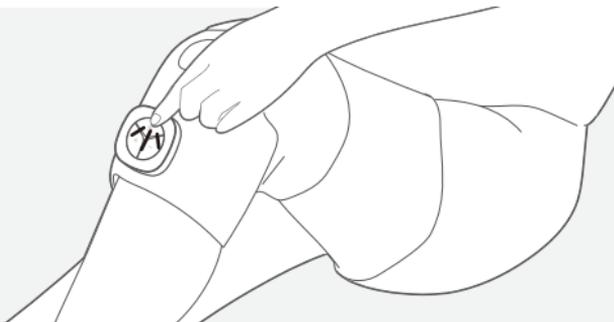

LED 불빛이 켜질 때까지 “M”버튼을 길게 눌러주십시오.

※ 최초 작동 시 모드 1(그린)로 작동됩니다. “M”버튼을 다시 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

STEP
02

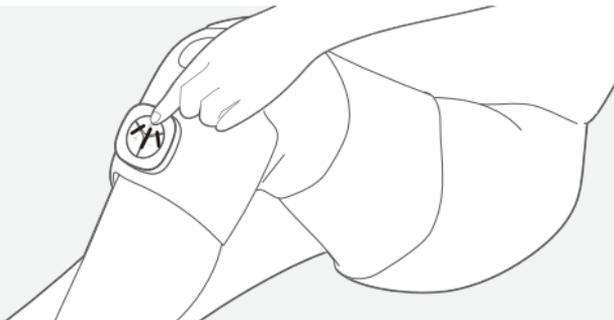

“M”버튼을 짧게 눌러 원하시는 모드를 선택하여 주십시오.
(6가지 모드)

※ 모드에 따라 각각 다른 LED 색상으로 표시됩니다.

모드 설정 방법

STEP
03



"+", "-"버튼을 눌러, 강도 조절이 가능합니다. (15단계 강도)

마사지기 모드

모드1 그린 : 회복모드




모드2 화이트 : 스트레칭모드



모드 설정 방법

모드3 블루 : 활력모드

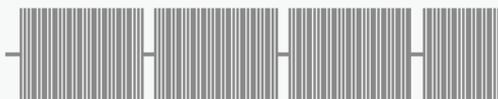

모드4 레드 : 두드림모드



모드5 딥블루 : 마사지모드




모드6 옐로우 : 이완모드



충전 방법

1. 동봉된 USB 충전 케이블을 메인기기 하단 충전 단자에 연결하십시오.
※ 반드시 알맞은 전압, 전류의 어댑터와 연결하여 충전하십시오.
2. 충전 중에는 중앙부 빨간색 LED가 점등 됩니다.
3. 충전 완료 시 중앙부 LED가 소등됩니다.
4. 충전이 완료되면 USB 충전 케이블을 메인기기로부터 분리해 주십시오.
5. 충전 중 제품을 사용하지 마십시오.
6. 충전 시간 : 약 60분, 사용 시간 : 약 480분
※ 배터리 수명에 따라 충전 시간 및 사용 시간이 다를 수 있습니다.
※ 본 제품은 전용 Type-C USB 충전 케이블과 함께 동봉되어 있으며, 가급적 제공된 USB 충전 케이블로 충전을 권장 드립니다.

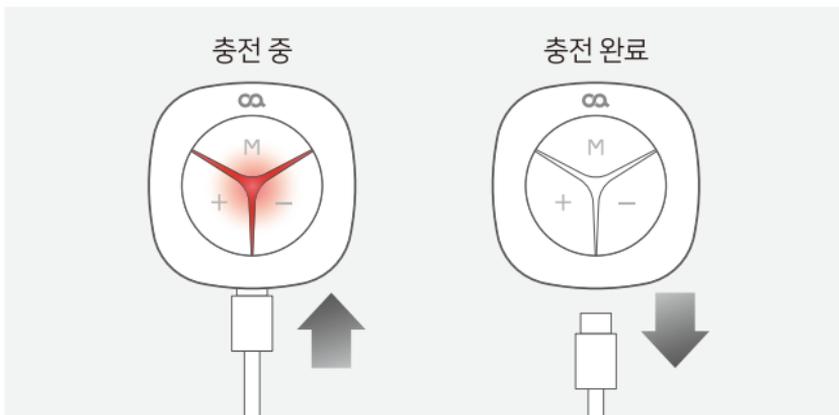

제품 보관 및 관리 방법

- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
 - 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
 - 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
 - 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
 - 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 본 제품은 배터리가 포함된 제품으로 제품에 충격을 가하지 마십시오.
 - 오랜 기간 제품을 사용하지 않을 경우, 배터리 수명 보호를 위해 1~2달에 한 번씩 충전하여 보관하십시오.
 - 본 제품 운송 시에는 배터리 충격을 최소화하기 위해 제품을 던지지 마시고, 화기에 주의하십시오.
 - 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
- ※ 라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등**
- 반드시 제품과 알맞은 전압, 전류의 충전기 및 충전 어댑터를 사용하십시오.

제품 보관 및 관리 방법

- 충전이 완료된 후 제품과 충전 케이블을 분리하십시오.
- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리배출 하십시오.

폐기 지침

- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

표시 기호	표시 재질	배출 방법
	종이	테이프,택배 송장 등 제거 후 접어서 종이류로 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	플라스틱으로 배출 스티로폼은 스티로폼으로 배출 ※ 바이오 계열은 종량제 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	비닐로 배출 ※ 바이오 계열은 종량제 배출
	-	각 지자체에 따라 재활용 지침이 다름으로 각 지자체의 소형가전 폐기 지침 확인 후 배출
	도포, 첩합 등	종량제 배출

※ 표시 기호 또는 표시 재질을 확인 후 배출 방법을 참조하여 분리 배출해주세요.

주의 사항

1. 반드시 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오.
※ **사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.**
2. 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.
3. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
4. 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 의료기기가 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
※ **골다공증, 정맥류 및 관절염 등의 질환이 있으신 환자분은 반드시 담당 의사와 상의 후 사용하십시오.**
5. 담요나 베개 등으로 제품을 덮고 사용하지 마십시오. 화재, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.
6. 본 제품 첫 사용 전 완충 후 사용하시기 바랍니다.
7. 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
8. 건강 상태 또는 마사지할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
9. 인공관절 등 신체에 이식된 의료기를 부착 중이신 분은 반드시 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.

주의 사항

10. 제품을 절대 가슴(심장) 및 경동맥 위치, 입 주변에 사용하지 마십시오.
11. 수면 중에 마사지기를 사용하지 마십시오.
12. 염증, 감염, 타박상 등의 외상이 있는 부위에 마사지기를 사용하지 마십시오.
13. 벨트 버클이나 귀금속과 같은 물질에 제품이 닿지 않게 주의 하여 주십시오.
14. 신체에 심장 박동기 또는 이식된 의료장비를 장착하고 있는 경우 사용하지 마십시오.
15. 손이 젖은 상태로 제품을 사용하지 마십시오.
16. 음주 후 사용하지 마십시오.
17. 어린아이의 사용을 금합니다.
18. 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
19. 임산부의 경우 담당 의사와 반드시 상의 후 제품을 사용 하십시오.
20. 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
※ 라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등.

주의 사항

21. 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
22. 충전 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
23. 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
24. 제품을 무리하게 사용 시에는 부작용이 있을 수 있습니다.
연속 사용을 하지 마십시오.
25. 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
26. 무릎 패드가 뜯어진 경우 사용하지 마십시오.
27. 보관 시 무릎 패드 부분을 무리하게 구기거나 접지 마십시오.
무릎 패드가 파손될 수 있습니다.

제품 사양

- 상품명 : 오아 바디스팟Knee
- 모델명 : OMS-013BK
- 정격 : DC 5V 1A / 2.5W
- 재질 : ABS, 네오프렌
- 사용시간 : 8시간 (총 16회)
- 1회 사용시간(자동 종료) : 30분
- 크기 : 메인 기기 - 44.3 X 44.3 X 10.6 (mm)
무릎 패드 - 600 X 245 (mm)
- 무게 : 메인 기기 - 14g / 무릎 패드 - 177g

회사 정보

- 수입원 : 오아 주식회사
- 제조국 : 중국
- A/S 및 제품문의 : 1661 - 4555
- 제품 무상 보증기간 : 구매일로부터 1년.
(단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 AS 만
가능합니다./택배비 별도)
- 주소 : 서울시 서초구 효령로46길 97, 오아 주식회사
- 홈페이지 : www.oa-world.com



오아 주식회사

서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 : 1661-4555

www.oa-world.com